


サイナス バルーン

■鼻腔内に挿入してバルーンを膨張させることにより、
髄液漏の可能性がある場合などの防止に役立ちます。

特長

- 創傷部への癒着が生じにくい、シリコン製バルーンです。
バルーン部膨張時は扁平に膨らむため、バルーン先端部が
創傷部へ均等に圧着します。
- チューブ先端部より50mm～100mmまで10mm毎に
マーキングが施されています。
- X線造影ライン入り

Sinus Balloon

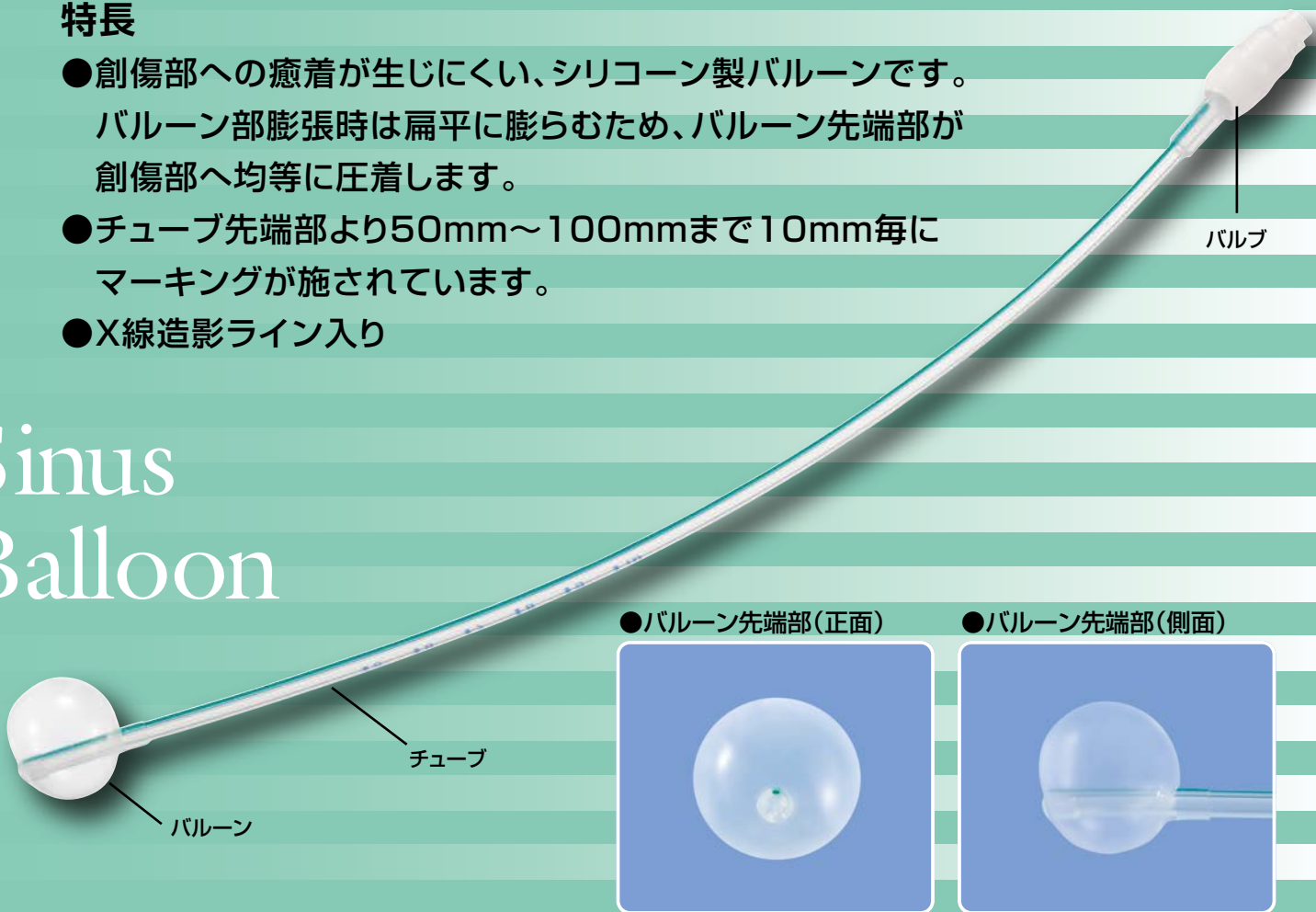

●バルーン先端部(正面)



●バルーン先端部(側面)



規格・仕様

製品番号	チューブ外径mm	バルーン推奨容量	包装単位
0224501	4.0(12Fr)	7mL以下	1本/箱

滅菌済 単回使用

●注意事項

骨の突起部位に接触することによりバルーンが破裂する可能性があります。

販売名：サイナスバルーンカテーテル
一般的名称：鼻止血用バルーン
医療機器届出番号：07B1X10001000007

※本カタログに掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

発売元



富士システムズ株式会社
<http://www.fujisys.co.jp/>

代理店

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
札幌支店 〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2
仙台支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-15-1
大宮支店 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2
東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
横浜支店 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-19-5
名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-19-6
金沢支店 〒920-0031 石川県金沢市広岡1-1-18
大阪支店 〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-7
広島支店 〒730-0015 広島市中区橋本町10-10
福岡支店 〒812-0038 福岡市博多区祇園町1-40

TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907
TEL(011)211-0751 FAX(011)211-0783
TEL(022)748-4201 FAX(022)748-4204
TEL(048)729-6480 FAX(048)644-9004
TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907
TEL(045)473-5321 FAX(045)473-5309
TEL(052)265-9221 FAX(052)265-9225
TEL(076)255-3499 FAX(076)262-2123
TEL(06)6943-8404 FAX(06)6943-1425
TEL(082)555-8091 FAX(082)227-4255
TEL(092)262-6777 FAX(092)262-6770