

[アラミド繊維補強ライン2本]を入れ、
ドレナージ操作の信頼性を高めた
ARシリーズが新登場

スパイナルドレナージセットAR


スパイナルドレナージARは、2本のアラミド繊維補強ラインを入れることにより、チューブの引張り強度を飛躍的に向上させました(裏ページの強度グラフ参照)。シリコンチューブの柔軟性はそのままにチューブの伸びを極限まで抑えることで、術後のドレナージチューブ抜去操作がより安全に確実に行うことが可能になりました。

頭部外傷・脳室内出血・クモ膜下出血などにより起こる、
頭蓋内圧亢進時のドレナージに使用するスパイナルドレナージセットです。




スパイナルドレナージセットAR

アラミド繊維入りシリコンチューブ(X線造影黒ライン入り)は、柔軟性はそのままに強度がアップしました。樹脂製コネクタのため、チューブを留置したままCT及びMRI撮影が行えます。ドレナージチューブ、腰椎穿刺針、コネクタがセットで、すぐにご使用いただけます。

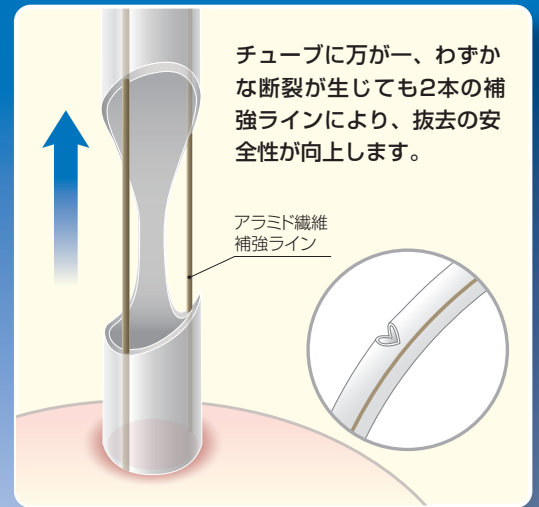

先端から10mm毎に100mmまで、100mmから50mm毎に600mmまで、数字マーキングが入っています。

【アラミド繊維補強ライン】により、従来品に比べ引っぱり強度がアップしました。剥離性に優れ、創口の損傷を極力抑えます。

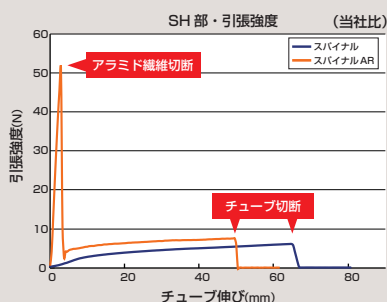

販売名：スパイナルドレナージセットAR
一般的名称：脳脊髄液用カテーテル
クラス分類：高度管理医療機器(クラスIV)
医療機器承認番号：22100BZX00941000

■ スパイナルドレナージセットAR

X線造影ライン(黒)

製品番号	内径mm	外径mm	全長mm	側孔	包装単位
0222803	0.9	1.7(5Fr)	1,500	6穴	1組/箱

附属品：腰椎穿刺針、コネクタ

滅菌済 単回使用

■ スパイナルドレナージセットAR ソフト

X線造影ライン(白)

製品番号	内径mm	外径mm	全長mm	側孔	包装単位
0222805	0.9	1.7(5Fr)	1,500	6穴	1組/箱

附属品：腰椎穿刺針、コネクタ

滅菌済 単回使用

穿刺針が必要な場合は…

■ 穿刺針(腰椎用)

販売名：穿刺針 医療機器認証番号：220ADBZX00118000

製品番号	サイズ	包装単位
5225011	14G×90mm	1本/箱

滅菌済 単回使用



※本カタログに掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

発売元

Fuji Systems Corporation

富士システムズ株式会社
<http://www.fujisys.co.jp/>

代理店

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
札幌支店 〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2
仙台支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-15-1
大宮支店 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2
東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
横浜支店 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-19-5
名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-19-6
金沢支店 〒920-0031 金沢市広岡1-1-18
大阪支店 〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-7
広島支店 〒730-0015 広島市中区橋本町10-10
福岡支店 〒812-0038 福岡市博多区祇園町1-40

TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907
TEL(011)211-0751 FAX(011)211-0783
TEL(022)748-4201 FAX(022)748-4204
TEL(048)729-6480 FAX(048)644-9004
TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907
TEL(045)473-5321 FAX(045)473-5309
TEL(052)265-9221 FAX(052)265-9225
TEL(076)255-3499 FAX(076)262-2123
TEL(06)6943-8404 FAX(06)6943-1425
TEL(082)555-8091 FAX(082)227-4255
TEL(092)262-6777 FAX(092)262-6770