


ペンローズドレーンAR

ペンローズドレーンはシリコン100%の特性を生かした柔軟性を持ち、生体組織への影響が少なく、体内留置に適しています。

体液、血液などの付着、凝固がしにくく、各種薬液にも冒されません。


剥離性に優れ、抜去が容易で創口の損傷を極力抑えます。

Aタイプはドレーン操作の信頼性を高める「アラミド繊維補強ライン(2本)」を備えています。

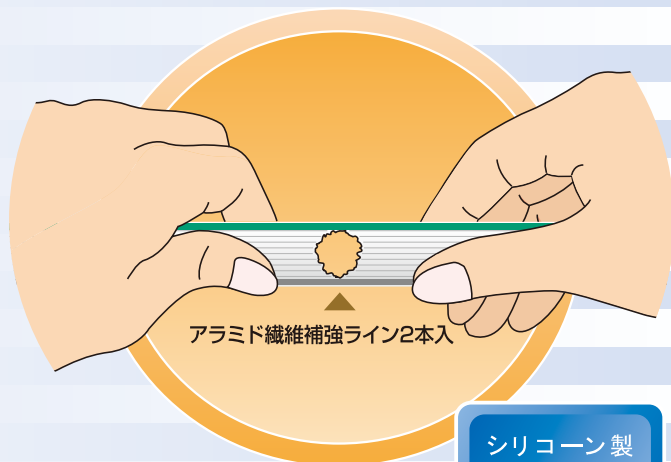


シリコン製
100%


Penrose Drain

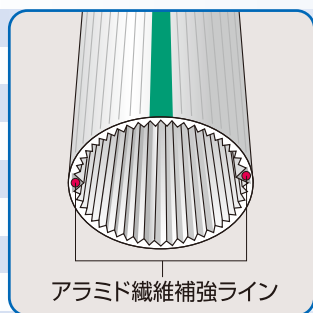


Aタイプ

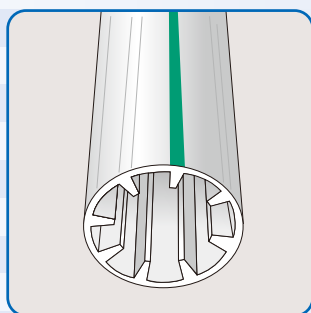

Bタイプ

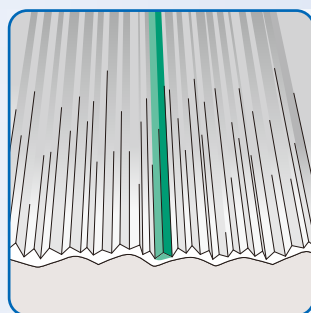

Fタイプ

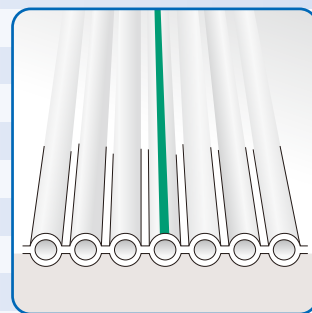

Mタイプ

Aタイプ 内面の特殊構造による毛細管現象の働きが排出を容易にします。

Bタイプ とくに大きな流路空間を必要とする場合に適しています。

Fタイプ シート状にしたフィルムタイプになっており、術時にはシガレット巻にして挿入します。

Mタイプ フラットに並んだ多管式チューブで、1本ずつ切り離しても使用できるマルチタイプです。

■ ペンローズドレーンAR 規格・仕様 医療機器認証番号:220ADBZX00113000

製品番号	呼称	補強ライン入	外径mm	横幅mm	全長mm	包装単位
0121004	A No.4	○	4.0	—	300	10本/箱
0121006	A No.6	○	6.0	—		
0121008	A No.8	○	8.0	—		
0121010	A No.10	○	10.0	—		
0121012	A No.12	○	12.0	—		
0121108	B No.8	—	8.0	—		
0121240	F No.40	—	—	40	—	—
0121330	M No.30	—	—	30		
0121340	M No.40	—	—	40		

X線造影ライン入り

滅菌済

*本カタログに掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

