

親水性効果によって挿入の操作性アップ

十二指腸造影用ゾンデ

# 消化器造影用バルーンカテーテルセット

シリコン製カテーテルとガイドワイヤに施した親水性コーティングが挿入時のスムーズな操作を可能にします。

なめらかな挿入を  
可能にする  
親水性コーティング

I型 先端ボール付

II型 先端ボール無

●親水性バルーンカテーテルに手技の操作性を高めるため、先端部の柔らかい親水性ガイドワイヤとファネル部にTコネクタを付属品に加え、スムーズな操作が効率よく行えます。



## 消化器造影用バルーンカテーテルセット 先端開口型

型	製品番号	外径mm	仕様	バルーン最大容量	全長mm	包装単位
I型	0117814	4.7(14Fr)	ボール有	25mL	1,500	1セット/ 箱
	0117816	5.3(16Fr)		40mL		
	0117818	6.0(18Fr)		40mL		
II型	0117834	4.7(14Fr)	ボール無	25mL		
	0117836	5.3(16Fr)		40mL		
	0117838	6.0(18Fr)		40mL		

X線造影ライン入


滅菌済 単回使用

付属品：親水性ガイドワイヤ 外径1.14mm(0.045") 全長2,400mm 1本  
Tコネクタ 1個 ガーゼ 5枚

販売名：消化器造影用バルーンカテーテル  
医療機器認証番号：225ADBZX00009000


### I型 先端ボール付

先端部に適度な重みをもたせることで消化器官の蠕動運動と連動し、カテーテルの追従がよりスムーズに行えます。先端部にステンレス製のボール（4個）を備えています。

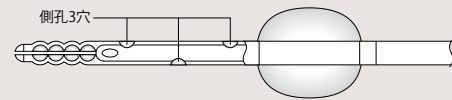

### II型 先端ボール無

先端部からバルーンまでの長さをわずか10mmに設定。より深部への挿入が容易で、X線造影診断の妨げにならないコンパクト設計です。

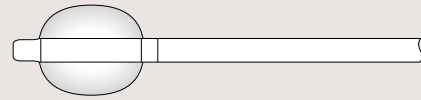

※本カタログに掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



発売元

富士システムズ株式会社

<http://www.fujisys.co.jp/>



富士システムズ  
公式 LINE



代理店

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14  
札幌支店 〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2  
仙台支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-15-1  
大宮支店 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2  
東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14  
名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-19-6  
大阪支店 〒540-0026 大阪市中央区内本町1-3-5  
広島支店 〒730-0015 広島市中区橋本町10-10  
福岡支店 〒812-0038 福岡市博多区祇園町1-40

TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907  
TEL(011)211-0751 FAX(011)211-0783  
TEL(022)748-4201 FAX(022)748-4204  
TEL(048)729-6480 FAX(048)644-9004  
TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907  
TEL(052)265-9221 FAX(052)265-9225  
TEL(06)6943-8404 FAX(06)6943-1425  
TEL(082)555-8091 FAX(082)227-4255  
TEL(092)262-6777 FAX(092)262-6770