


バルーン付オクリューションカテーテル ICオクルーター



- 胸部下行大動脈及び胸腹部大動脈瘤手術の際、肋間動脈を閉塞する際に使用するオクリューションバルーンカテーテルです。
- カテーテル本体に特殊素材を採用することで胸部下行・胸腹部大動脈系の屈曲した細血管へのスムーズな挿入が可能です。

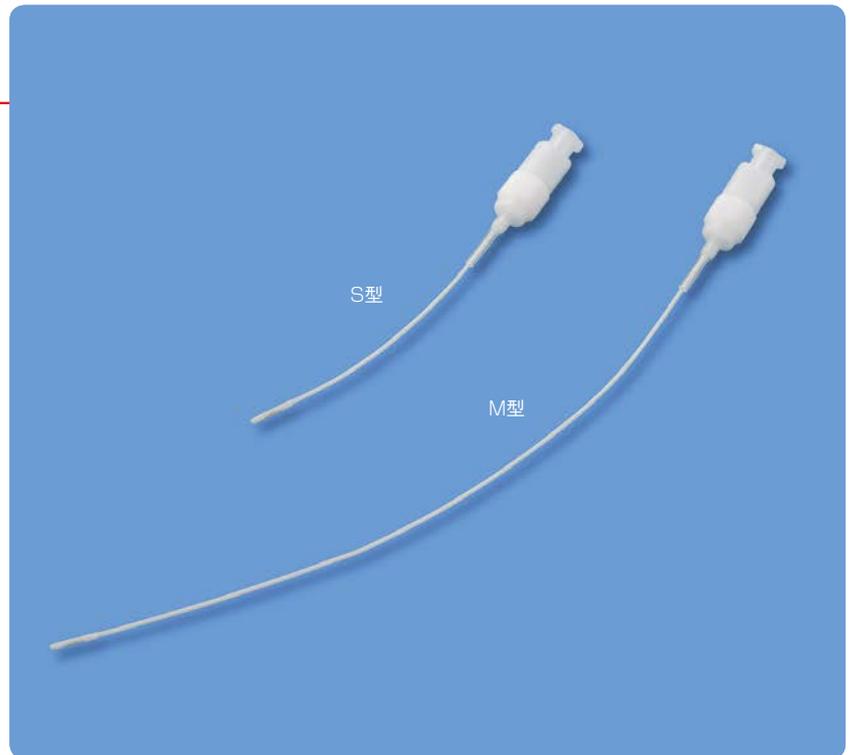


- カテーテルの長さは目的部位に合わせて長短2タイプから選択できるので、より安全なオクリューションが効率よく行えます。
- 血管内の損傷を軽減するシリコン製カテーテルです。
- シリンジを装着してコネクタを回転させることによりロックされ活栓が不要です。[ツイストロック機構]


胸部肋間動脈留置の使用例



■ 外観図

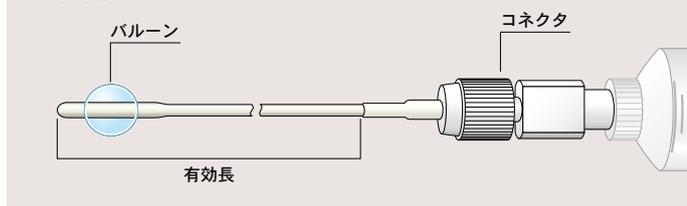

[ツイストロック機構]

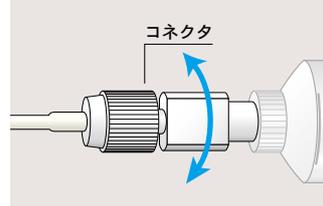

製品番号	型名	有効長(mm)	全長(mm)	シャフト径(mm)	バルーン直径(mm)	包装単位
0180151	S型	60	100	0.95	4.0 (容量0.03mL)	2本/箱
0180152	M型	160	200			

シャフト径0.95mm バルーン直径4.0mm(容量0.03mL)

滅菌済

先端部



販売名：テンポラリー オクリューション バルーンカテーテルⅢ
医療機器承認番号：22100BZX00830000
特定保険医療材料請求名：オクリューション標準型