


冠動脈バイパスカニューレ ミニシャントプロ





- 冠動脈バイパス手術の際に、冠動脈の末梢血管への血流を確実に確保するために、一時的に使用するシリコン製ミニシャントカニューレです。
- 冠動脈への挿入が容易で、内膜損傷が起きにくく、血液のフローが充分にとれます。

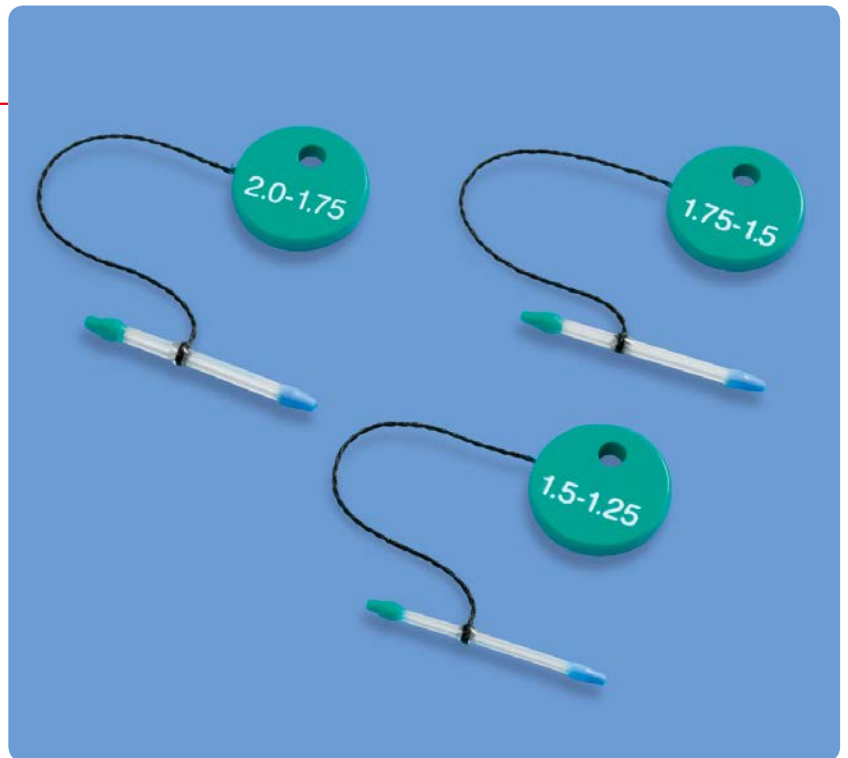


- 先端チップがSTEP-TIPになり、血管に挿入しやすくなりました。
- シリコン製カニューレなので細い冠動脈にも挿入、抜去が容易に行えます。
- カニューレは末梢側先端外径を中枢側より0.25mm細く加工することで中枢外径に見合う内径を確保。十分な血流を確保します。
- 誤挿入防止のため、カニューレ先端を中枢側(グリーン)と末梢側(ブルー)で色分けしてあります。
- バルーンクリッププロと併用することでSequential Bypassにおいて1本の血管を2枝バイパスする際にも使用可能。

■断面図(サイズ: No.5の場合)

※カニューレ本体の外径・内径は、中枢側も末梢側も同じです。

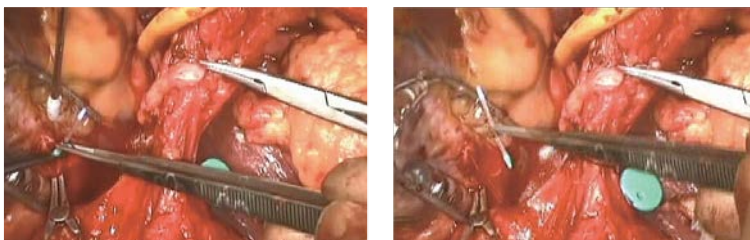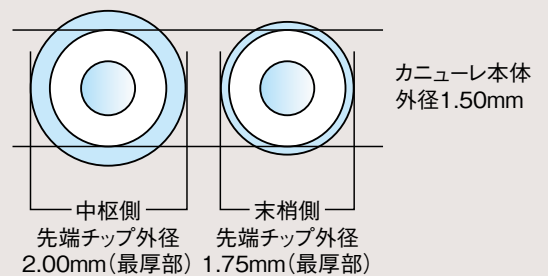

■外観図

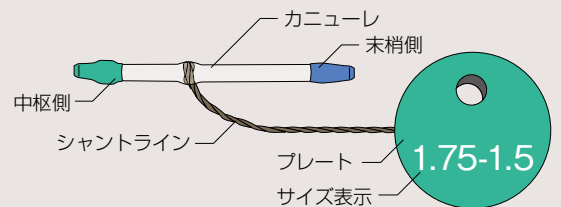

製品番号	サイズ	外径(mm)		全長(mm)	包装単位
		中枢側	末梢側		
0182010	NO.2	1.25	1.00	19.8	1本/箱
0182013	NO.3	1.50	1.25	21.0	
0182016	NO.4	1.75	1.50	21.4	
0182019	NO.5	2.00	1.75	21.4	
0182022	NO.6	2.25	2.00	22.0	
0182025	NO.7	2.50	2.25	22.0	
0182028	NO.8	2.75	2.50	22.4	
0182031	NO.9	3.00	2.75	23.0	

製品番号	サイズ	外径(mm)		全長(mm)	包装単位
		中枢側	末梢側		
0182110	NO.2	1.25	1.00	30.0	1本/箱
0182113	NO.3	1.50	1.25	30.0	
0182116	NO.4	1.75	1.50	30.0	
0182119	NO.5	2.00	1.75	30.0	

滅菌済

販売名: ファイコン冠動脈ミニシャント
医療機器承認番号: 21800BZZ10115000

滅菌済