

バルーン付マイクロカテーテル SPFカテーテル




- 胸部大動脈瘤や胸腹部大動脈瘤などの手術時に使用するオクリューションバルーンカテーテルです。バルーン遠位部の血液灌流も可能です。
- 高品質プラチナ製コイルのマイクロカテーテルで、より適度な柔軟性を確保したバランスの良いカテーテルシャフトが、スムーズな挿入を可能にしました。



- 肋間動脈、腰動脈、同定した責任肋間動脈への挿入ができ、シリコンバルーンにより血管への損傷を低減します。
- バルーンの前後2カ所にマーカを設け、X線透視下でのバルーンの位置関係を容易に行えます。
- プラチナ製コイル巻き(先端から290mm)で、適度な柔軟性を確保しています。
- 主腔注入口は、カテーテル先端孔に通じています。
- コアキシャル型2WAY構造です。

SPFカテーテル流量測定試験(社内データ)

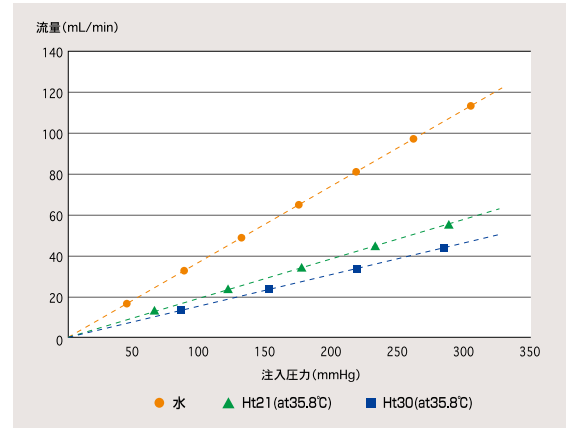

■ 外観図



製品番号	先端部長さ (mm)	バルーン有効長 (mm)	推奨注入容量 (mL)	拡張径 (mm)	全長 (mm)	シャフト径 (mm)	主腔耐圧	包装単位
0180140	2	5	0.05	約4	365 (コネクタを含む)	1.47 (4.4Fr)	2.07MPa	1本/箱

附属品：シリンジ1mL

滅菌済

販売名：テンポラリー オクリューション バルーンカテーテルI
 医療機器承認番号：22100BZX00867000
 特定保険医療材料請求名：オクリューションカテーテル®特殊型

先端部

