

T CONNECTOR

T-コネクタ

インターベック®
INTERVEC

バルーン拡張式血管形成術向け
カテーテル用コネクタ

リピオドール^{※1} / Onyx^{※2} 対応型

T-コネクタ

T-connector



New Device

富士システムズ株式会社

インターベック[®]
INTERVEC
T-コネクタ T-connector

経皮経血管的な治療や検査の時に、ガイディングカテーテルに接続して血液の漏れの軽減に、また、カテーテル操作の補助などサイドポートからの薬液や造影剤の微量な注入や圧力の測定に役立ちます。

- コネクタ嵌合部は、ルアーロックフィッティング構造 (ISO594-2) に適合したタイプで、コネクタ内部にはサムホイールの回転に応じて開閉する止血弁を採用しています。
- 最大通過外径は 7Fr/2.4mm です。



[規格・仕様] [リビオドール^{※1} / Onyx^{※2} 対応型]


製品番号	タイプ	カテーテル外径サイズ	コネクタ内腔残量
N5004002	ハード	7Fr φ 2.4mm	0.42mL
N5004004	ソフト	7Fr φ 2.4mm	0.31mL

包装単位：1本/箱 滅菌済 単回使用

※ 1 リビオドール製品名は、ゲルベ・ジャパン社の登録商標または、商標
 ※ 2 Onyx 製品名は、コヴィディエン・ジャパン社の登録商標または、商標

[外観図]

(原寸大)

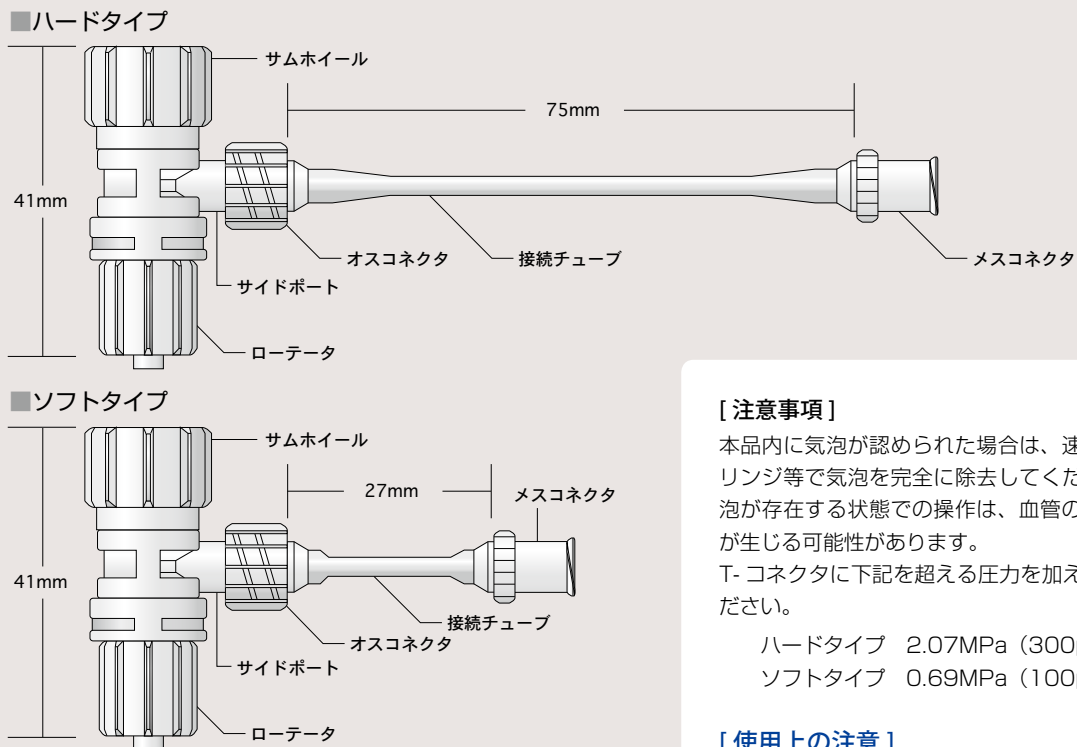

[注意事項]

本品内に気泡が認められた場合は、速やかにシリンジ等で気泡を完全に除去してください。気泡が存在する状態での操作は、血管の空気塞栓が生じる可能性があります。T-コネクタに下記を超える圧力を加えないでください。

- ハードタイプ 2.07MPa (300psi)
- ソフトタイプ 0.69MPa (100psi)

[使用上の注意]

- ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステルからなる油性造影剤 (例:リビオドール) を使用する際は、破損の可能性に留意して使用してください。
- 使用前には、必ず添付文書をお読みください。

販売名：Y-コネクタ
 一般的名称：バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ
 クラス分類：管理医療機器
 医療機器認証番号：222ADBZX00056000

※本カタログに掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



〒113-0034 東京都文京区湯島1-13-2
 TEL. 03-3839-0201
 営業所:東京・札幌・仙台・埼玉・千葉・八王子・横浜・金沢・名古屋・京都・関西・神戸・広島・松山・福岡・宮崎
<http://www.medikit.co.jp/>

製造販売 **富士システムズ株式会社**
<http://www.fujisys.co.jp/>

IVR 推進室 〒113-0033
 東京都文京区本郷3-23-14 ショウエイビル
 TEL (03) 5689-1901 FAX (03) 5689-1907